


## ● Mobile Sauerstoff-Akuttherapie gegen Clusterkopfschmerzen und Migräne

Die mobile Akuttherapie gegen Clusterkopfschmerzen und Migräne mit der Cluster-O<sub>2</sub>-Maske inkl. Reservoirbeutel, gemäß Leitlinien der DGN 2008 (Deutsche Gesellschaft für Neurologie) siehe unter [www.oxycaare.eu](http://www.oxycaare.eu)

Im Reservoirbeutel wird die Sauerstoffkonzentration auf ca. 100% angehoben. Durch die Teilatmung aus dem Reservoirbeutel wird der Patient inspiratorisch maximal mit Sauerstoff versorgt.

Der Verbrauch von Sauerstoff kann individuell z.B. auf 7-9 L/Min. eingestellt werden, da während der Expiration der Sauerstoff im Reservoirbeutel gesammelt wird. Dadurch steht inspiratorisch ein höheres O<sub>2</sub>-Volumen (ca. 12-15 L/Min.) zur Verfügung.

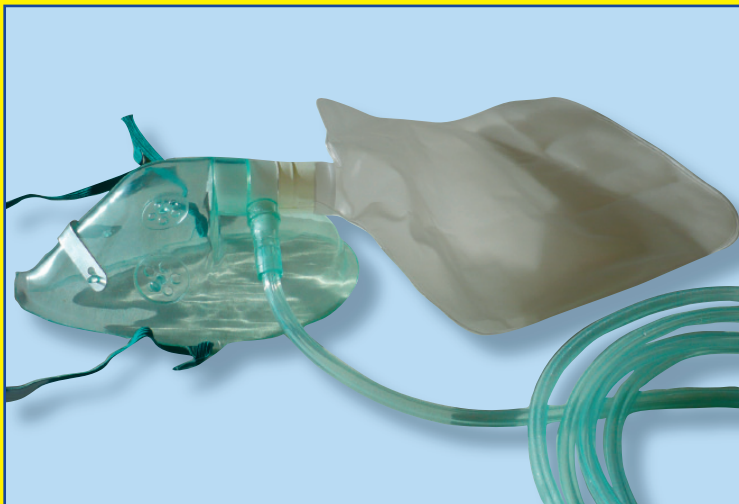

### Die Vorteile der Cluster-O<sub>2</sub>-Maske mit Reservoirbeutel

- Sauerstoffgabe 7 bis 9 L/Min.
- Anwendungsdauer ca. 15 bis 20 Min.
- Anerkanntes Verfahren / Kostenübernahme durch Krankenkassen möglich
- Transportabel: Auto, Zug, Urlaub
- 60 - 70 % Therapieerfolg im Akutfall gemäß Leitlinien der DGN 2008 (Deutsche Gesellschaft für Neurologie)

- Schnelle bundesweite Versorgung
- Kostenübernahme durch Krankenkassen möglich
- Organisation der Kostenübernahme durch uns

